

Welk reinigings- en desinfectieprotocol u het beste kunt volgen en hoe vaak u de toetsenborden moet ontsmetten hangt af van diverse factoren.

We raden u aan om dit te bepalen met uw hygiënist of een externe infectie preventie specialist.

Als algemene leidraad kunt u aanhouden dat u dezelfde richtlijn volgt als voor andere oppervlaktes die intensief aangeraakt worden in dezelfde ruimte.

Op deze pagina's kunt u nagaan of de methode die u wilt volgen is toegestaan voor onze producten.



Wij onthouden ons van het gebruik van antimicrobiële coatings en geven er de voorkeur aan het belang van regelmatig desinfecteren te benadrukken.



Restricties

- Volg altijd de instructies van de leverancier van uw reinigings- of desinfectieproduct.
- Gebruik geen middelen op basis van petroleum of aceton, en geen schurende reinigingsmaterialen, zoals schuursponsjes en dergelijke.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen buiten die beschreven in de handleiding.
- Stel het product niet bloot aan hittesterilisatie of druksterilisatie.
- Het blootstellen van siliconenproducten aan de oliën in sommige handalcohol, handlotions en andere verzachtende middelen verkort hun levensduur. Regelmatig schoonmaken helpt dit effect te beperken. Een dergelijke degradatie valt niet onder de garantie.



Best practice tip!

**Reinigen
tussen twee
behandelingen**

Desinfectiemiddelen die u kunt gebruiken

- Op chloorbasis, niet meer dan 100.000 ppm (10%) chloor
- Op alcoholbasis
- Op glutaraldehydebasis
- Op phenolbasis
- Op formaldehydebasis, niet meer dan 370.000 ppm (37%)
- Oxidanten, zoals waterstofperoxide, niet meer dan 30.000 ppm (3%)
- Quaternair Ammonium, niet meer dan 20.000 ppm (2%)

MAN & MACHINE Reinigings- en desinfectievoorschriften

Onze wasprogramma's

C Mouse				
C Mouse Wireless				
Its Cool				
Its Cool Drape				
Its Cool Flat				
Laptop drapes and mousepads				
Mighty Mouse				
Petite Mouse				
Really Cool Really Cool Touch				
Really Cool Drape				
Slim Cool Slim Cool+				
Universal keyboard Drape				
Very Cool				
Very Cool Flat				
Very Cool Drape				



Afnemen

U mag het product afnemen met een zachte doek, zoals een microvezeldoek of weg-werpdoekje, met een zachte borstel (met de zachtheid van een verfkwest), of met een spons. Gebruik beslist géén schuursponsjes of ander ruw materiaal.



Sprayer

U mag een spray gebruiken op het product.



Afspoelen

U mag het product afspoelen.




Afdekkapje gebruiken

Uitsluitend onderdompelen met afgekoppelde kabel en volledig met kapje afgesloten kabelingang.



Onderdompelen

U mag het product onderdompelen.

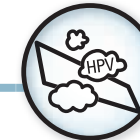


Blootstellen aan HPV

U mag het product blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase.



Steriliseren

U mag het product steriliseren in een autoclaaf of thermodesinfector (tot 134 °C, getest voor 200 cycli).

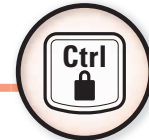

Met blokkeermodus

Om te blokkeren of deblokkeren de reinigings-toets of beide Ctrl toetsen 3 seconden ingedrukt houden. Met signaallichtjes.

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Hier vindt u producten waarvan de fabrikant aangeeft dat ze gebruikt mogen worden voor het schoonmaken van siliconen rubber. Ondanks deze indicatie van geschiktheid voor het schoonmaken van onze siliconen toetsenborden en muizen, kunnen we nooit helemaal uitsluiten dat er ongewenste effecten optreden; door het product zelf, of in de combinatie met andere omgevingsfactoren.

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze lijst. Wij raden u aan om altijd eerst een klein-schalige test uit te voeren, voordat u een desinfectant volledig opneemt in uw algehele reinigings- en desinfectieprotocollen.

Neem voor nadere instructies of meer informatie a.u.b. contact op met de fabrikant.

Productnaam	Fabrikant	Site
150671 Antibac Keyboard Wipes (80 wipes)	Abena A/S	www.abena.dk
Acrylan	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Alpet D2	SARAYA Europe	www.saraya-europe.com
Alpha Guard	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	www.dr-deppe.de
Anios DDSH	Anios Laboratories	www.anios.com
Aniosurf Citron	Anios Laboratories	www.anios.com
Antiseptica Kombi Liquid	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Apesin AP 100	Tana Chemie GmbH	www.tana.de
Apesin AP 3	Tana Chemie GmbH	www.tana.de

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
Apesin AP 300	Tana Chemie GmbH	www.tana.de
Apesin combi DR	Tana Chemie GmbH	www.tana.de
Apesin rapid	Tana Chemie GmbH	www.tana.de
B 10 Wischdesinfektion	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
B 20 Wischdesinfektion	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
B 30 Schnelldesinfektion	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
B 40 Schnelldesinfektion	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
B 45 Schnelldesinfektion	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
B 60 Desinfektionstücher	Orochemie GmbH + Co. KG	www.orochemie.de
Banicide Plus	Pascal International Inc.	www.pascalinternational.net
Biguacid Liquid	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Biguacid Plus	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Biguacid-S	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Buraton 10F 1%	Schülke & Mayr GmbH	www.schuelke.com
CaviCide™	Metrex Research Corporation	www.metrex.com

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
CaviWipes™	Metrex Research Corporation	www.metrex.com
Chlor-Clean	Guest Medical	guest-medical.co.uk/en
Clorox Disinfecting Wipes	Clorox	www.clorox.com
Cleanisept Wipes Maxi (80 wipes)	Dr. Schumacher GmbH	www.schumacher-online.com
Compliance	Metrex Research Corporation	www.metrex.com
Descocid-N	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Descogen Liquid	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Descogen Liquid r.f.u.	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH	www.antiseptica.de
Descosept Forte	Dr. Schumacher GmbH	www.schumacher-online.com
Destec Bavid Floor (Dilution product)	Seitz GmbH	www.seitz24.com
Destec Bavid Go	Seitz GmbH	www.seitz24.com
Destec Bavid Wipe	Seitz GmbH	www.seitz24.com
Hexanios	Anios Laboratories	www.anios.com
Incides N	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com
Incidin Perfekt 2% Vol.	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
Incidin Pro	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com
Incidin Rapid	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com
Incidin Liquid	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com
LifeClean disinfectant	LifeClean International AB	www.lifeclean.se
Mikrozyd AF Liquid	Schülke & Mayr GmbH	www.schuelke.com
Mikrozyd Sensitive Liquid	Schülke & Mayr GmbH	www.schuelke.com
MinutenSpray-classic (500 ml bottle)	Alpro Medical GmbH	www.alpro-dental.de
MinutenWipes (120 wipes)	Alpro Medical GmbH	www.alpro-dental.de
Neoform MED AF	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	www.drweigert.de
Neoform MED FF	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	www.drweigert.de
Neoform MED Rapid	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	www.drweigert.de
PlastiSept (500 ml bottle)	Alpro Medical GmbH	www.alpro-dental.de
PlastiSept-Wipes (120 wipes)	Alpro Medical GmbH	www.alpro-dental.de
Sani-24® Germicidal Spray	PDI	https://pdihc.com
Sani-Cloth® AF3 Germicidal Disposable Wipe	PDI	https://pdihc.com

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
Sani-Cloth Active	Ecolab Deutschland GmbH	www.ecolab.com
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe	PDI	https://pdihc.com
Sani-Cloth® Plus Germicidal Disposable Cloth	PDI	https://pdihc.com
Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe	PDI	https://pdihc.com
Sani-HyPerCide™ Germicidal Spray	PDI	https://pdihc.com
Sani-Prime® Germicidal Spray	PDI	https://pdihc.com
SinAlc Tücher	HIMED GmbH	www.hibomed.de
Sporox II	Sultan Chemists Inc.	www.sultanhc.com
Spray In Neu	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	www.dr-deppe.de
Spray Off N	Laboratorium Dr.Deppe GmbH	www.dr-deppe.de
Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe	PDI	https://pdihc.com
Surfanios	Anios Laboratories	www.anios.com
Surfa'safe	Anios Laboratories	www.anios.com
Terralin Protect	Schülke & Mayr GmbH	www.schuelke.com
Ultrasol active	Dr. Schumacher GmbH	www.schumacher-online.com

MAN & MACHINE Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen

Productnaam	Fabrikant	Site
Wavicide-01	Metrex Research Corporation	www.metrex.com
Wet Wipe Chlorine Disinfection	Wet Wipe A/S	www.wetwipe.eu
Wet Wipe PHMB Disinfection	Wet Wipe A/S	www.wetwipe.eu
Wet Wipe Triamin Disinfection	Wet Wipe A/S	www.wetwipe.eu
Wet Wipe Ethanol Disinfection	Wet Wipe A/S	www.wetwipe.eu
Wip'anios	Anios Laboratories	www.anios.com